


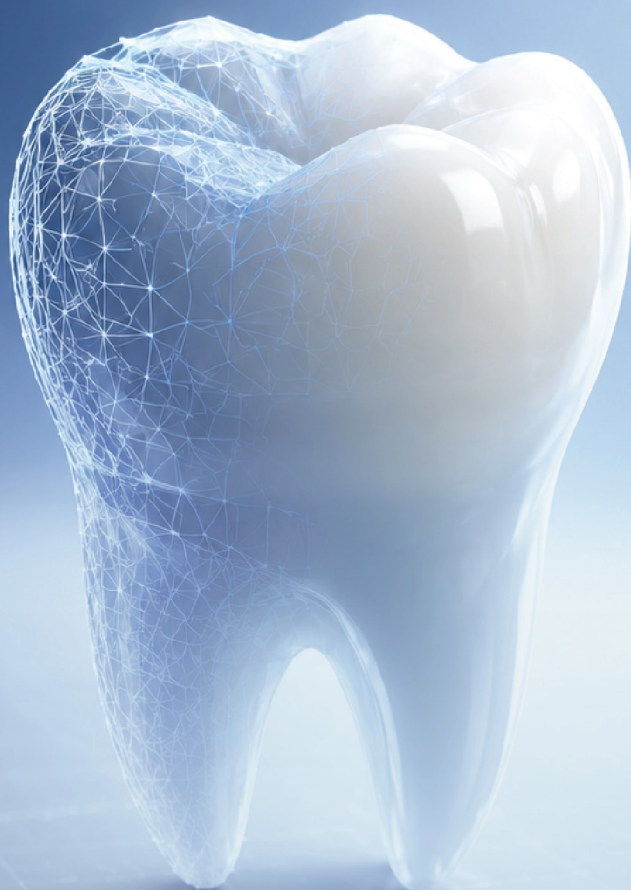

Precision • Aesthetics • Technology

ICDisrael

Internatinal Creative Dental Lab

דיוק מתקדם

מקצועיות ללא פשרות

אסתטיקה טבעית



סטנדרט עבודה שמורגש בכל תוצאה
לרופאים שמצפים ליותר
ומטופלים שמקבלים יותר

פרופיל החברה

International Creative Dental-lab Israel

ICD Israel הינה מעבדת שיניים מתקדמת ומובילה, המתמחה בפתרונות שיקום דנטליים מתקדמים לרופאי שיניים ולמרפאות ברחבי הארץ. המעבדה משלבת ניסיון קליני רב־שנים עם טכנולוגיות ייצור מתקדמות, ומציעה פתרונות איכותיים בתחומי האימפלנטולוגיה, השיקום הקבוע והאסתטיקה הדנטלית.

כל תהליך עבודה מבוצע בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך הקפדה על דיוק, התאמה מושלמת ותוצאה קלינית מיטבית. ICD Israel פועלת בהתאם לתקני ISO ו-FDA, ומשלבת מערכות CAD/CAM מתקדמות, חומרי גלם מובילים ושיטות ייצור חדשניות לשחזור מדויק, אסתטי ועמיד לאורך זמן.

ל- ICD Israel יועץ שיקומי מבחירי רופאי השיניים בארץ עם ניסיון של 30 שנה בתחום השתלים הדנטאליים ושיקום הפה. החברה מבטיחה לספק שרותי מעבדה באיכות הגבוהה ביותר העשויים ממיטב החומרים ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ברמות תמחיר תחרותיות.

30
שנות ניסיון

החשוב מכל יש לנו היכולת להבטיח אסתטיקה מירבית ורמת דיוק גבוהה ביותר של השחזורים והשיקומים המסופקים על ידינו.

חזון החברה

ICD Israel שמה לה למטרה להיות מובילה בארץ באספקת שרותי מעבדה בתחומים: Dental Implantology, שיקומים קבועים, שיקומים אסתטיים, שיקומים נשלפים Cam Cad, טכנולוגיות חדשות ועוד.



החברה מקיימת ימי עיון לרופאי שיניים בתחום שיקום הפה ובפרט בתחום השתלים הדנטליים במטרה ליעל את עבודתו של הרופא במהלך התהליך השיקומי.

אחריות

ICD Israel - מתחייבת לאחריות על המוצרים המסופקים על ידה. בעידן בו התחרות ברפואת שיניים מתגברת, ICD Israel מאפשרת לכם רופאי השיניים להתייעל תוך שיפור איכות מוצרי המעבדה הנמסרים לקהל מטופליכם וכל זאת ברמות דיוק ואסתטיקה גבוהות ביותר, רמת תמחיר תחרותית וזמן כסא מופחת משמעותית.



רמת דיוק גבוהה



אסתטיקה מירבית



זמן כיסא מופחת

פרופיל המעבדה

ICD - International Creative Dental Lab
נוסדה בשנת 2001. המעבדה מתמחה
בפתרונות שיקום דנטליים מתקדמים,
תוך שילוב בין ניסיון קליני רב-שנים,
טכנולוגיות CAD/CAM מתקדמות
וסטנדרטים בינלאומיים מחמירים.
כל מוצר מיוצר בדיוק מרבי, רמת גימור
גבוהה ותשומת לב מלאה לפרטים
הקליניים והאסתטיים.

**מעבדת ICD פועלת בהתאם
לתקני ISO, ומחזיקה באישורי
CE ו-FDA ומשתפת פעולה באופן
הדוק עם רופאי שיניים משלב התכנון
ועד למסירה להשגת תוצאה מדויקת,
טבעית ועמידה לאורך זמן.**

ICD Israel נחשבת
לאחת ממעבדות השיניים
המובילות בישראל.





מאחורי כל שחזור
מדויק עומדים אנשים
מיומנים, טכנולוגיה
מתקדמת ובקרת
איכות קפדנית.

Shape Dental System 3



CAD/CAM system
for professionals



הטכנולוגיות המתקדמות
ביותר בעולם בתחום.
צוות טכנאים מהשורה הראשונה.



למה לעבוד איתנו


דיוק קליני מתקדם

שילוב טכנולוגיות CAD/CAM מתקדמות ותהליכי בקרת איכות מחמירים להתאמה קלינית מדויקת ויציבה.




שיתוף פעולה מקצועי עם הרופא

עבודה משותפת משלב התכנון ועד למסירה, עם תקשורת ישירה ושליטה מלאה בתהליך

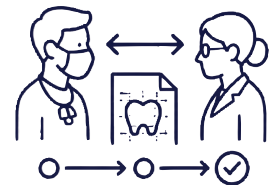

אסתטיקה צפויה ואחידה

תוצאות טבעיות, עקביות וברות־שחזור גם לאורך זמן.

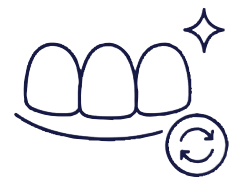

ניסיון מוכח בשיקום מורכב

צוות טכנאים בכירים עם ניסיון רב בעבודות שיקום ואסתטיקה מתקדמת, כולל מקרים מאתגרים.



אמינות, זמינות ועמידה בלוחות זמנים

תהליך עבודה ברור, שקוף ומדויק ללא הפתעות



שנתיים אחריות

אחריות של שנתיים על עבודות, כחלק מהמחויבות שלנו לאיכות, יציבות ותוצאה קלינית אמינה.


Remake & Adjustment Policy

התאמות ותיקונים מבוצעים בהתאם למדיניות המעבדה ובמקרים הבאים:

- התאמה קלינית נדרשת
- תיקון או ביצוע מחדש עקב פגם בשחזור
- התאמות אסתטיות בהתאם לתכנון המאושר
- החזרת עבודה ישנה לזיכוי



המדיניות אינה חלה על שינוי תוכנית טיפול, נתונים חסרים או שינויים קליניים שלא דווחו מראש.

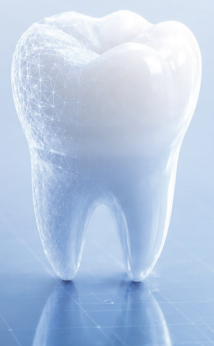

Quality Foremost

Kind of Material	Details (Ingredients)	Brand	CE No.	Origin
NP for PFM (Ni-Cr)	Argeloy N.P.Star	Argen	CE0086	America
NP for PFM (Co-Cr)	Argeloy NP Supreme	Argen	CE0086	America
NP for PFM (Co-Cr)	Bego Wirobond C	Bego	CE0197	Germany
Semi-precious for FCC	Argenco 50 (Au 50%, Pd 5.0%, Ag 32.5%) yellow	Argen	CE0086	America
Semi-precious for PFM	Argenco Y+ (Au 2%, Pd 34.9%, Ag 30%) yellow	Argen	CE0086	America
Semi-precious for PFM	Argelite 54B (Pd 53.5%, Ag 37.5%), white	Argen	CE0086	America
High-precious for PFM	Argedent 860Y (Au 86%, Pt 11%), strong yellow	Argen	CE0086	America
High-precious for PFM	Argedent Euro (Au 40.0%, Pd 39.4%, Ag 10.0%), white	Argen	CE0086	America
Ceramic powder for PFM	VITA VMK 95	VITA	CE0124	Germany
Ceramic powder for Emax	Ivoclar IPS E-MAX Ceram	Ivoclar	CE0123	Liechtenstein
Ceramic powder for Zirconia	VITA VM 9	VITA	CE0124	Germany
All-Ceramic IPS Emax	Ivoclar IPS E-MAX Press	Ivoclar	CE0123	Liechtenstein
All-Ceramic Zirconia	Sagemax Zirconium Block	Sagemax	CE0086	America
All-Ceramic Zirconia	Upcera Zirconium Block	Upcera	CE0197	China
Metal for Framework	CoCr Dental Alloy	Argen	CE0086	America
Metal for Framework	Bego Co-Cr Alloy	Bego	CE0197	Germany
Metal for Framework	Vitallium 2000	Dentsply	CE0086	America
Metal for Framework	Pure Titanium	DentaUrur	CE0483	Germany
Acrylic Teeth	Yamahachi Acrylic Teeth	Yamahachi	CE0120	Japan
Acrylic Resin	Acrylic denture base polymers	Vertex	CE0197	Netherlands
Acrylic Resin	Acrylic denture base polymers	Dentsply	CE0197	America
Acrylic Resin	Valplast / flexible denture base polymers	Valplast	CE0510	America



כתרי חרסינה מאוחה למתכת

240₪	כתר חרסינה מאוחה למתכת PFM CR-CO
400₪	גשר מרילנד על בסיס מתכת - פונטיק חרסינה + 2 כנפיים
80₪	כנף נוספת למרילנד
50₪	חרסינה מדמה חניכיים ורודה ליחידת כתר
	מתכות אצילות / חצי אצילות - בהתאם למשקל ומחירי שוק

שחזורי מתכת מלאים

450₪	כתר טלסקופי - משמר גדם מתחת לכתר
120₪	מבנה יצוק בלתי ישיר
80₪	מבנה יצוק ישיר

כתרי כל חרסינה

480₪	כתר חרסינה מאוחה לזירקוניה (layered Zirconia Crown)
480₪	כתר זירקוניה מלא לשוחקים (Full Zirconia Crown)
480₪	כתר Emax
480₪	חזיתית מחרסינה (Emax Laminate/Veneer)

שיקום על גבי שתלים

390₪	כתר מודבק ע"ג שתל (Cemented PFM on Implant)
400₪	כתר מוברג ע"ג שתל (Screw retained PFM on Implant)
4,500₪	גשר מוברג ע"ג שתלים 6 (Screw retained PFM on Implant)
200₪	תוספת שתלים לגשר
480₪	כתר זירקוניה מוברג/מודבק (Full/Layered Zirconia)
50₪	טיפול ב-T Base
90₪	השחזת מבנה
11,220₪	בסיס טיטניום עם גשר זירקוניה מונוליטית (Full Zirconia)
850₪	תותבת רוכבת על 4 בולים/לוקייטורים
3,000₪	תותבת רוכבת על גבי דואלר בר 4 שתלים
150₪	תוספת כל שתל נוסף
1,350₪	תותבת מוברגת על גבי 4 שתלים כולל בר מתכת
400₪	תוספת לכל שתל נוסף (תותבת מוברגת)
200₪	עלות מבנה אינדיבידואלי (כל חלקי השיקום על חשבון הרופא)

המשך מחירון

תותבות

₪550	תותבת אקריל שלמה ישר לסיום
₪600	תותבת אקריל שלמה לביצוע בשלבים
₪340	תותבת חלקית מידית מאקריל
₪200	פליפר עד 2 שיניים מאקריל
₪200	רשת יצוקה לתותבת (Cr-Co Metallic Net)
₪550	תותבת וולפלסט חלקית
₪360	פליפר עד 2 שיניים וולפלסט
₪850	תותבת חלקית מאקריל עם בסיס סקלט CR-CO

שונות

₪70	כתר זמני
₪100	כתר זמני עם חיזוק מתכתי
₪70	כף אישית
₪50	גילוף אבחנתי MOCK UP (מחיר ליחידה)
₪110	תוספת וו וולפלסט לתותבת
₪95	שינוי צבע חרסינה (מחיר לכתר)
₪250	סד לילה קשיח מאקריל / רך / גמיש
₪1,740	התקן דנטלי לנחירות ודום נשימה (SNORING DEVICE)
₪120	מודל מודפס לסת שלמה
₪90	מודל מודפס חצי לסת


החזרת עבודות לזיכוי הינה עד 14 ימים מקבלת עבודה.
במידה ויש צורך להחזר עבודה לביצוע מחדש יש להחזיר
עבודה ישנה לזיכוי ומידות חדשות/מנשך.



תקנון ופרוטוקולי עבודה

פרוטוקול לקיחת מידה בסריקה

- יש לוודא כי כיני הסריקה מותאמים לקוטר השתל ובהתאמה לחברת השתלים, שהשתמשם בעת ההשתלה.
 - כיני סריקה צרים/רחבים ניתנים לסריקה, רק עם כיני סריקה מהשתלים של יצרן השתלים.
 - בעת הסריקה יש לוודא כי אין דימום מהחניכיים וכיני הסריקה מוברגים עד הסוף, אם אינך בטוח השתמש בצילום פריאפיקלי לאשר את הדבר והחל בסריקה.
 - מהלך הסריקה: יש ליצור רצף סריקה של הלסת במינימום תמונות הניתן, כדי לייצר קובץ איכותי.
 - את כיני הסריקה יש לסרוק מלאים מכל הצדדים ונקודות מגע עם השיניים הסמוכות במידה ויש. הקפדה על סריקה נכונה ואיכותית, תביא לתוצאה מדויקת!
- המלצה:
במקרים בהם אין מספיק מקום
במנשך מומלץ לשקול מעבר
מכתרי PFM לזירקוניה מונוליטית
הניתנים לביצוע בסיטואציות
מנשכים נמוכים מאוד.
- וודא כי המנשך שנסגר ע"י התוכנה תואם את מנשך בפה ובדוק כי הגובה שהותרת במנשך מאפשר בניה של כתר.
 - מנשך נלקח במגע סגרי מלא של השיניים האחוריות. במידה והמנשך פתוח או שהפציינט סוגר בפרוטרוזיה או שיש Over-Bite חריג יש לעדכן את המעבדה, בהוראות הניתנות.
 - בלסת מחוסרת שיניים יש לקחת מעבר לסריקת השתלים/לסת מודל לימוד (Study Model) של הגשר הזמני/תותבת. האידיאלי ביותר – שיניים לפני עקירה.

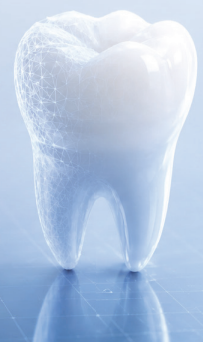

פרוטוקול לקיחת מידה ידנית

- עליכם לאפשר גבולות ברורים בשיניים מושחזות ועל כן אנו ממליצים בשימוש בוואש כדי לאפשר בהירות.
- שימו לב כי לקיחת מידה שלא בשיטה זו תגרום לחזרה על העבודה וזמן כיסא מיותר.
- יש לוודא כי בעבודות הנלקחות על שתלים יש לצרף את כל החלקים הנחוצים לשיקום כגון: טרנספרים, אנלוגים, מבנים.
- במידה ויהיה חוסר באחד החלקים הוא יוזמן מחברת השתלים על חשבונך.
- אנא הקפידו לשלוח מידה + אנטגוניסט + מנשך על מנת לבצע עבודה בצורה מדויקת.
- אנא הקפידו לשטוף ולחטא את המידה טרם שליחתה ובמידה והפציינט נושא נגיף הפטיטיס יש לעדכן על כך העבודה.

דגשים למילוי טופס הזמנה

- יש להקפיד למלא את פרטי המרפאה, הרופא ושם המתרפא ותאריך הזמנת הפציינט.
- יש למלא בצורה מסודרת את הבקשות: סוג שיקום, סוג החומר הדרוש כולל מספרי שיניים מדויקים.

מקרים בהם תידרש עלות כספית

- השיקום המקורי לא יוחזר אלינו.
- אם נדרש לשנות גוון לגוון שונה מזה שהוזמן בהזמנה הראשונה.
- כאשר יש שינוי במהות העבודה, לדוגמא: מעבר ממודבק למוברג, מעבודה ברמת השתל לעבודה ברמת המולטי-יוניט, מ-PFM לזירקוניה, וכדומה.
- במידה וצוות בקרת האיכות שלנו הודיע לך שיש לקחת מידה מחדש כדי להתקדם לייצור, וביקשת להמשיך על המידה הלא ראויה.

חתימת הרופא

שם הרופא / מרפאה: _____

תאריך: _____

קראתי את התקנון ואת פרוטוקולי העבודה המפורטים לעיל,
ואני מאשר/ת אותם

חתימת הרופא + חותמת: _____

